

EvolutionHD™

Med X Change EvolutionHD™在小巧的机身中整合了最前沿的1080p全高清视频录制技术，为Apple和Windows环境下的编辑工作带来了出众的高清视频质量。

支持1080P全高清视频录制

提供DVI或(3G) HD-SDI输入，支持1080p / 720p分辨率及NTSC / PAL双制式。

通过高清显微镜/内窥镜摄取高清视频及静态图像

支持H.264 .mp4/.mov、JPEG、BMP、PNG、DICOM格式。

集成12.7cm显示屏


HDMI®输出能够克隆显示主集成屏幕画面、实时视频或用户界面。

多语言支持



打印/播放/复制

- 自动打印到索尼医用级打印机
- 播放视频/静态图像，并复制到外部USB介质
- 静态图像增强

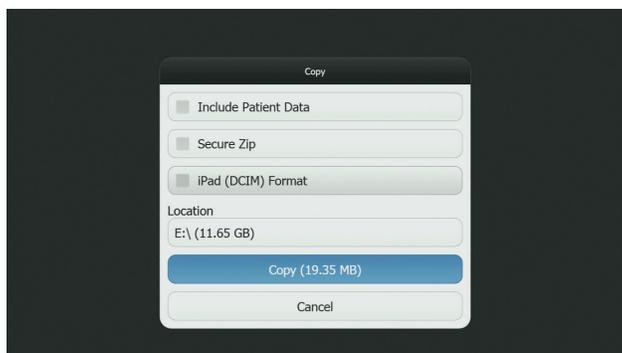

符合HIPAA标准的安全文件

- 在加密Zip压缩包导出、外科医生资料、用户名/密码方面提供安全保障。

电源要求: 5V DCA, 25w

符合的医疗标准: CE、TUV、CAN/CSA 22.2 No. 601.1-M90

UL60601-1:2003、IEC 60601-1-2:2007 (IEC第三版)

ISO 13485认证

©2012 Med X Change. 保留所有权利。所有商标和注册商标均是其各自所有人的财产。

一键录制

可通过遥控器、按钮、MedXStream™ App或选配的外部触摸屏实现一键录制。




APPLE iOS App

使用我们的MedXStream™ App将您的iPhone、iPad或iPod Touch与EvolutionHD™进行配对后，即可快速访问各类外科手术病例，以便查阅、批注、播放和下载。此外还提供外科手术报告、iOS6/iOS7兼容性支持，甚至还有远程控制功能。更多信息请访问medxstream.com。



存储

- 大存储容量 —— 内置750 GB硬盘驱动器，可保存约100小时高清视频
- 录制到内置和外置USB硬盘驱动器。

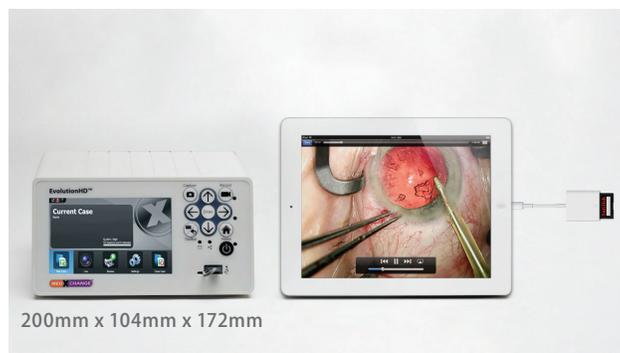

后期制作

- Mac及Windows 7 / 8本地编辑 —— 可使用Final Cut Pro、Quicktime、iMovie或Adobe Premier Pro进行编辑。



本地电话: 1 (941) 794-9977
www.medxchange.com

24小时技术支持: 1 (888) 982-4469
support@medxchange.com