

EvolutionHD™

Med X Change EvolutionHD™は、AppleおよびWindowsでの編集が可能な高品質なHDビデオを提供します。コンパクトなデバイスながら最新のフルハイビジョン(1080p)のビデオレコーディング機能を持っています。

フルハイビジョン(1080P)のビデオレコーディングをサポート

1080pまたは720pのNTSC & PAL用DVIまたは (3G) HD-SDI 入力端子を搭載


HD顕微鏡/内視鏡からHDビデオおよび静止画をキャプチャ

H.264 .mp4/.mov、JPEG、BMP、PNG、DICOMで保存します。

12.7CM統合画面


HDMI®は、メイン統合画面、ライブビデオ、またはユーザーインターフェースの表示をそのまま出力します。

多言語をサポート

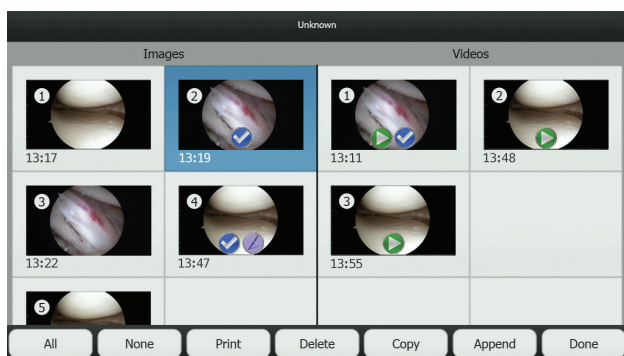

プリント/再生/コピー

- ソニーメディカルプリンターに自動印刷可能
- ビデオ/静止画の再生および外付けのUSBメディアにコピー可能
- 静止画像拡張機能

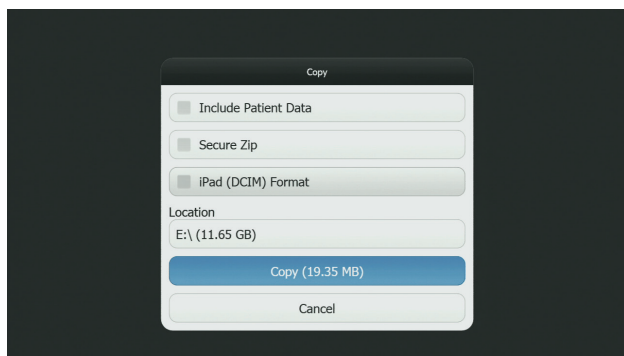

HIPAAセキュアファイル

- 暗号化されたZipエクスポート、外科医プロフィール、ユーザーネーム/パスワードセキュリティ。

所要電力:DCA5V、25W

準拠医療規格:CE、TUV、CAN/CSA 22.2 No. 601.1-M90

UL60601-1:2003、IEC 60601-1-2:2007、IEC 3rd Edition

ISO 13485認証取得済み

©2012 Med X Change. 無断複写・転載を禁じます。すべての商標および登録された商標は、各社が所有しています。

ワンタッチで記録可能

リモコン、ボタン、MedXStream™ App、またはオプションの外部タッチスクリーン(External Touch Screen)からでも操作可能



APPLE iOSアプリ

MedXStream™アプリを使用して、iPhone、iPadまたはiPod TouchをEvolutionHD™と連携させることで、手術例に即座にアクセスすることができ、レビューや注釈付け、再生、ダウンロードを行えます。手術のレポートやiOS6/iOS7との互換性、さらにはリモートコントロール機能も含まれています。詳細な情報は、medxstream.comから入手できます。



保存

- 大容量の保存記憶容量 – 750GBのハードドライブ、約100時間のHDビデオを保存可能
- 内蔵または外付けのUSBハードドライブに保存



撮影後の編集

- MacおよびWindows 7、8での編集可能 – Final Cut Pro、Quicktime、iMovieまたはAdobe Premier Proで使用可能